


The background features a stylized illustration of a human heart with its major blood vessels, rendered in shades of red and purple. Overlaid on this are two horizontal ECG (heart rate) lines in a golden-brown color, one at the top and one at the bottom of the frame.

TUTORIAL DO APLICATIVO DA CALL ECG




- Abra o aplicativo Call ECG C-TOS.
- Preencha os campos E-MAIL e SENHA com as suas credenciais, e clique em ENTRAR.

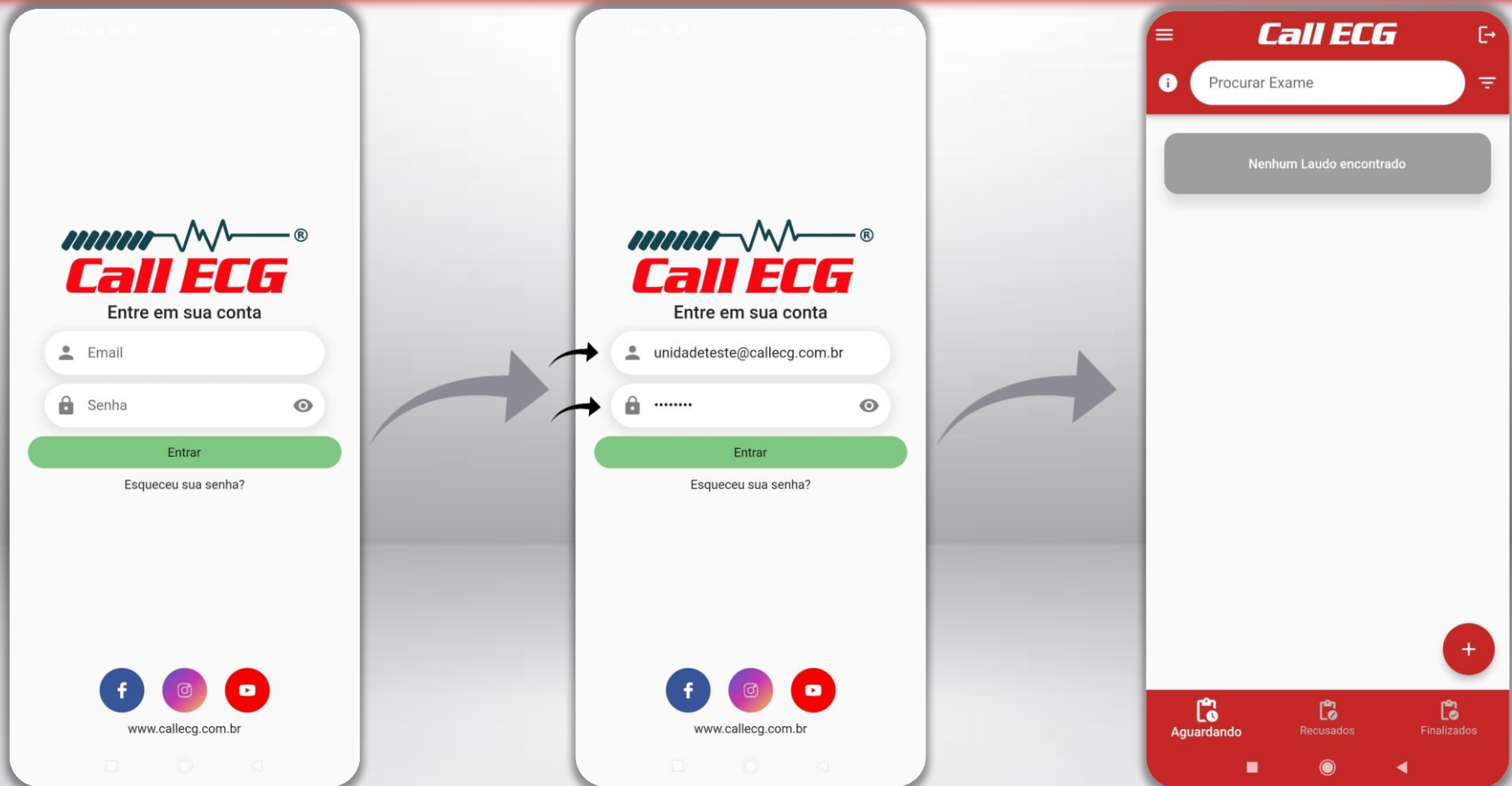


O Menu exames é subdividido em três abas/categorias, sendo elas:

- 1. **Aguardando** – para exames que foram enviados para central e estão aguardando laudo;
- 2. **Recusados** – para exames que necessitam atenção da unidade e em alguns casos necessitam serem repetidos;
- 3. **Finalizados** – para exames já laudados pelo médico cardiologista ou cancelados pela unidade através da aba recusados;

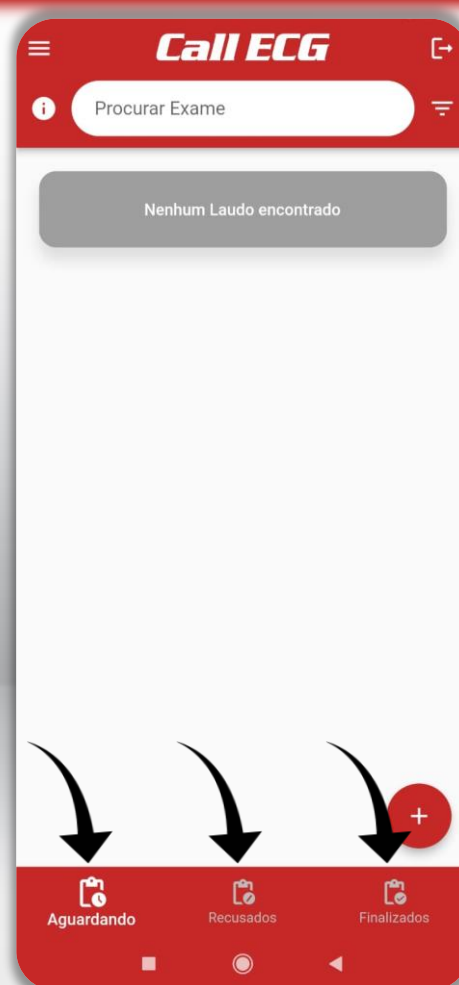


- O aplicativo permite o usuário ativar a opção **NOTIFICAÇÕES**, esta função encaminhará uma notificação quando os exames forem finalizados.

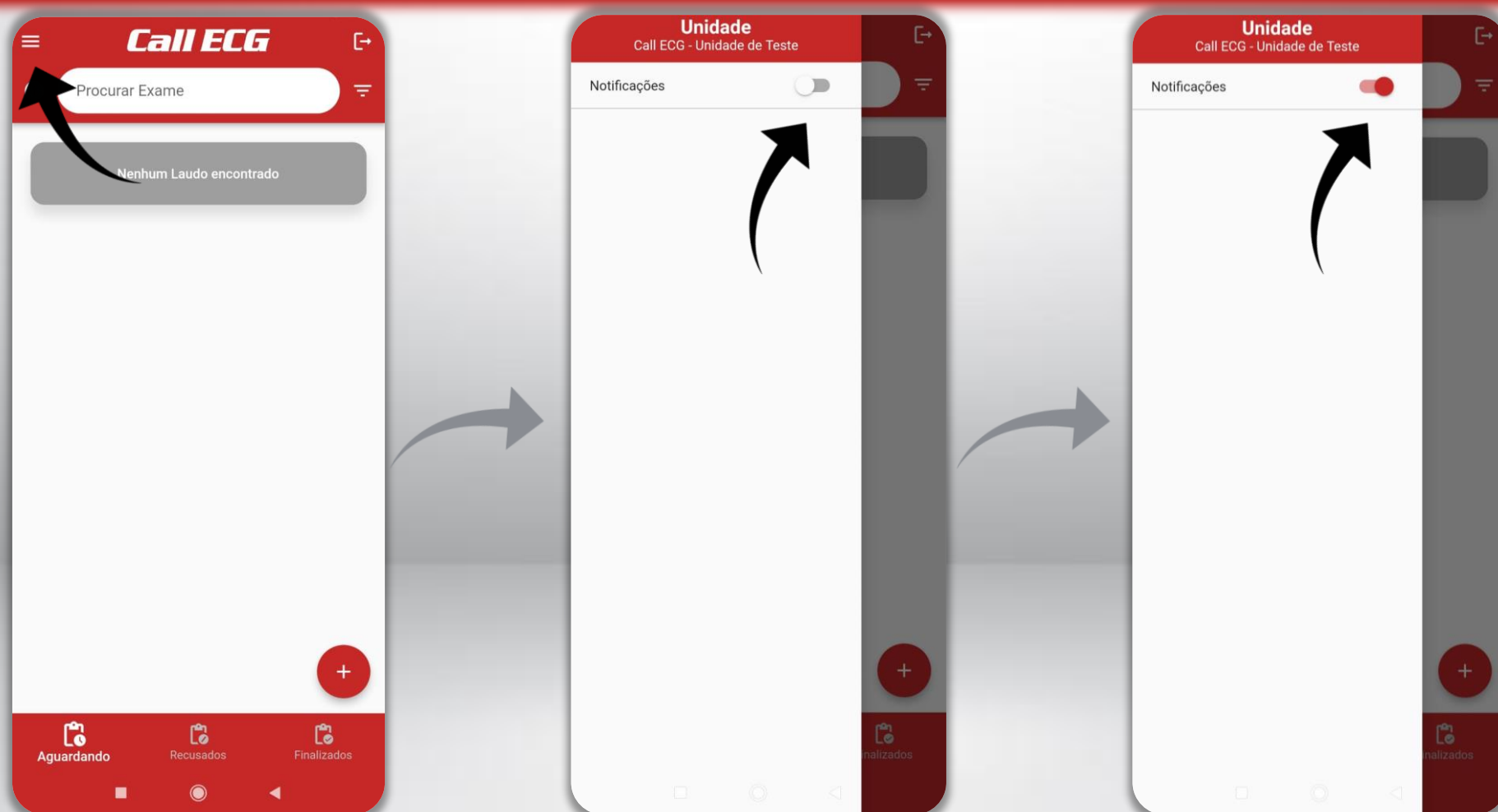


As legendas são subdividas em 05 cores:

- 1. Verde (laudando)
- 2. Vermelho (emergência)
- 3. Amarelo (revisar)
- 4. Roxo (retificação)
- 5. Cinza (padrão)

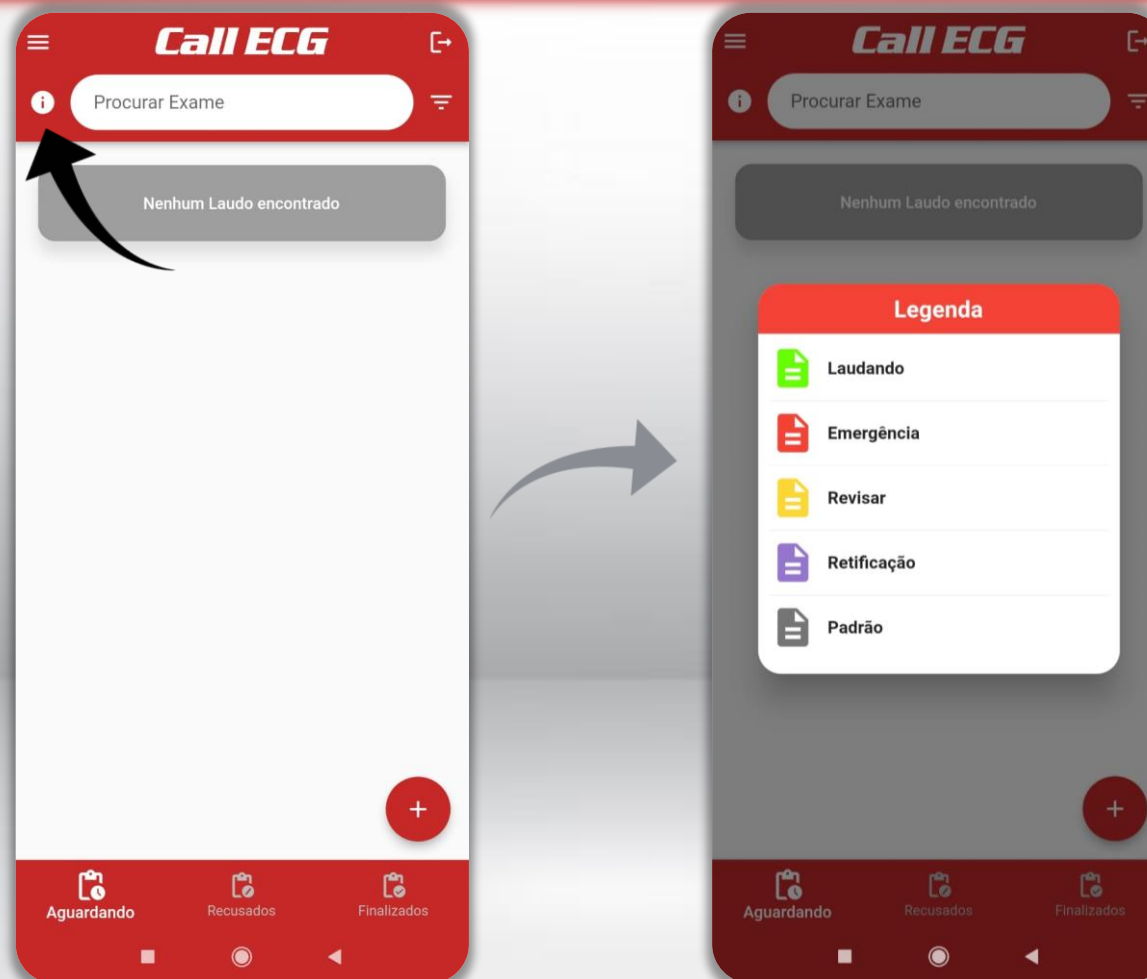

- O aplicativo permite o usuário **FILTRAR** os exames por período e categoria.

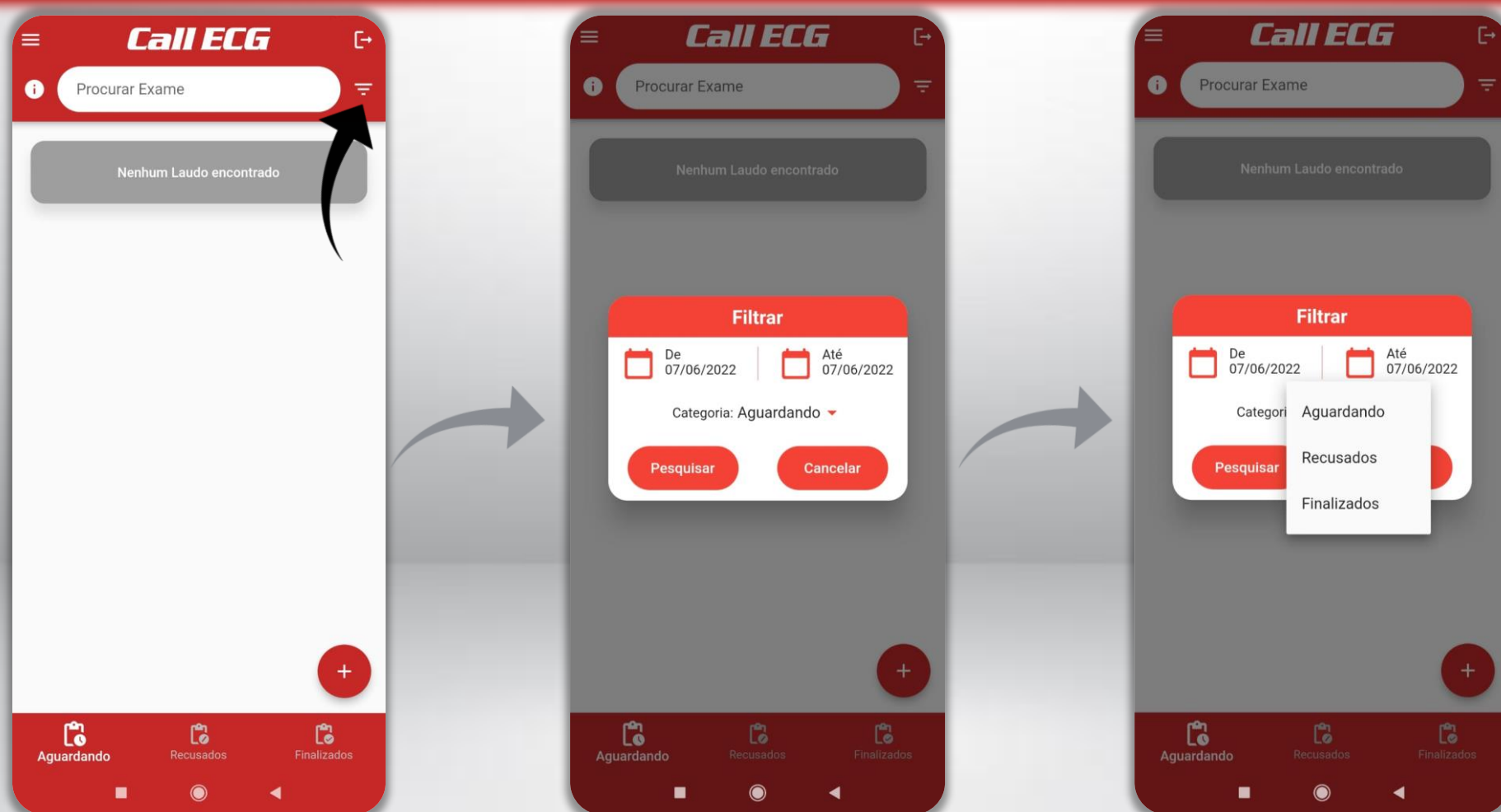

- Clique no botão + para **ADICIONAR UM NOVO EXAME**.
- Preencha corretamente **TODOS** os dados do paciente.

The image illustrates the process of adding a new exam in the Call ECG mobile application. It consists of three sequential screens:

- Screen 1 (Procurar Exame):** The main search screen. It features a search bar at the top with the text "Procurar Exame" and a red header with the "Call ECG" logo. A message "Nenhum Laudo encontrado" is displayed in the center. At the bottom right, there is a red circular button with a white "+" symbol, which is highlighted by a curved arrow.
- Screen 2 (Novo Exame):** The form for adding a new exam. It has a red header with a back arrow and the title "Novo Exame". The form includes several input fields and dropdown menus: "CPF *" (with a search icon), "Paciente *" (with a person icon), "Data de Aniversário *" (with a calendar icon), "Sexo *" (with a gender icon), "Prioridade *" (with a bar chart icon), "Usa Marcapasso? *" (with a heart icon), "Telefone *" (with a phone icon), and "Numero de Atendimento/..." (with a list icon). Below these fields are several buttons for symptoms: "DOR PRECORDIAL", "DISPNÉIA", "CEFALÉIA", "SEM MEDICAMENTO", "PRÉ OP.", "CHAGAS", "NÁUSEAS E/OU VÔMITOS", and "SUDORESE". A curved arrow points from the "+" button on the first screen to this form.
- Screen 3 (Novo Exame):** The same form as Screen 2, but with data entered. The fields are filled with: "CPF *" 123.456.789-01, "Paciente *" PACIENTE DE TESTE, "Data de Aniversário *" 10/10/1980, "Sexo *" Feminino, "Prioridade *" Eletivo, "Usa Marcapasso? *" Não, and "Telefone *" (00)00000-0000. The symptom buttons "DOR PRECORDIAL", "SEM MEDICAMENTO", and "SUDORESE" are highlighted in red. A curved arrow points from the form on Screen 2 to this screen.


- É de extrema importância o preenchimento correto de **TODOS** os dados do paciente.

The screenshot shows a mobile application interface for creating a new exam. The form is titled 'Novo Exame' and contains the following fields and buttons, with numbered arrows indicating the sequence of input:


- 1** points to the 'CPF *' field.
- 2** points to the 'Paciente *' field.
- 3** points to the 'Data de Aniversário *' field.
- 4** points to the 'Usa Marcapasso? *' dropdown menu.
- 5** points to the 'Sexo *' dropdown menu.
- 6** points to the 'Telefone *' field.
- 7** points to the 'Prioridade *' dropdown menu.
- 8** points to the 'Numero de Atendimento/...' field.
- 9** points to the 'NÁUSEAS E/OU VÔMITOS' button.

- Preencha o campo **(1) CPF** e clique na **lupa** para pesquisar se o (a) paciente já possui cadastro em nosso sistema.
- Caso o (a) paciente **JÁ POSSUA CADASTRO**, conclua preenchendo apenas os campos com **ausência de dados**:
 - **(4) Utilização de marcapasso**
 - **(7) Prioridade do exame (eletivo ou urgente)**
 - **(8) Número de atendimento/guia se utilizar**
 - **(9) Selecione os sintomas e/ou descreva-os no campo observações**
- Caso o paciente **NÃO** possua o número do documento durante o envio do exame, poderá ser preenchido o campo **(1) CPF** com números zeros (não informar o CPF prejudica na identificação única do paciente, histórico de exames, consultas facilitadas, entre outros. Sempre informe o CPF do paciente).
- Caso o paciente **NÃO POSSUA CADASTRO**, preencha **TODOS** os dados posteriores:
 - **(2) Nome completo (sem abreviaturas)**
 - **(3) Data de nascimento**
 - **(4) Utilização de marcapasso**
 - **(5) Sexo**
 - **(6) Telefone do paciente, caso não possua poderá ser preenchido este campo com números zeros**
 - **(7) Prioridade do exame (eletivo ou urgente)**
 - **(8) Número de atendimento/guia se utilizar**
 - **(9) Selecione os sintomas e/ou descreva-os no campo observações**

- Os dados adicionais do paciente poderão ser adicionados no campo **OBSERVAÇÕES**.
- Para registrar o exame, clique no botão **TIRAR FOTO**.
- Após tirar a foto, **RECORTE-A** se necessário para deixá-la em melhor enquadramento.
- Por fim, clique em **ENVIAR EXAME**.

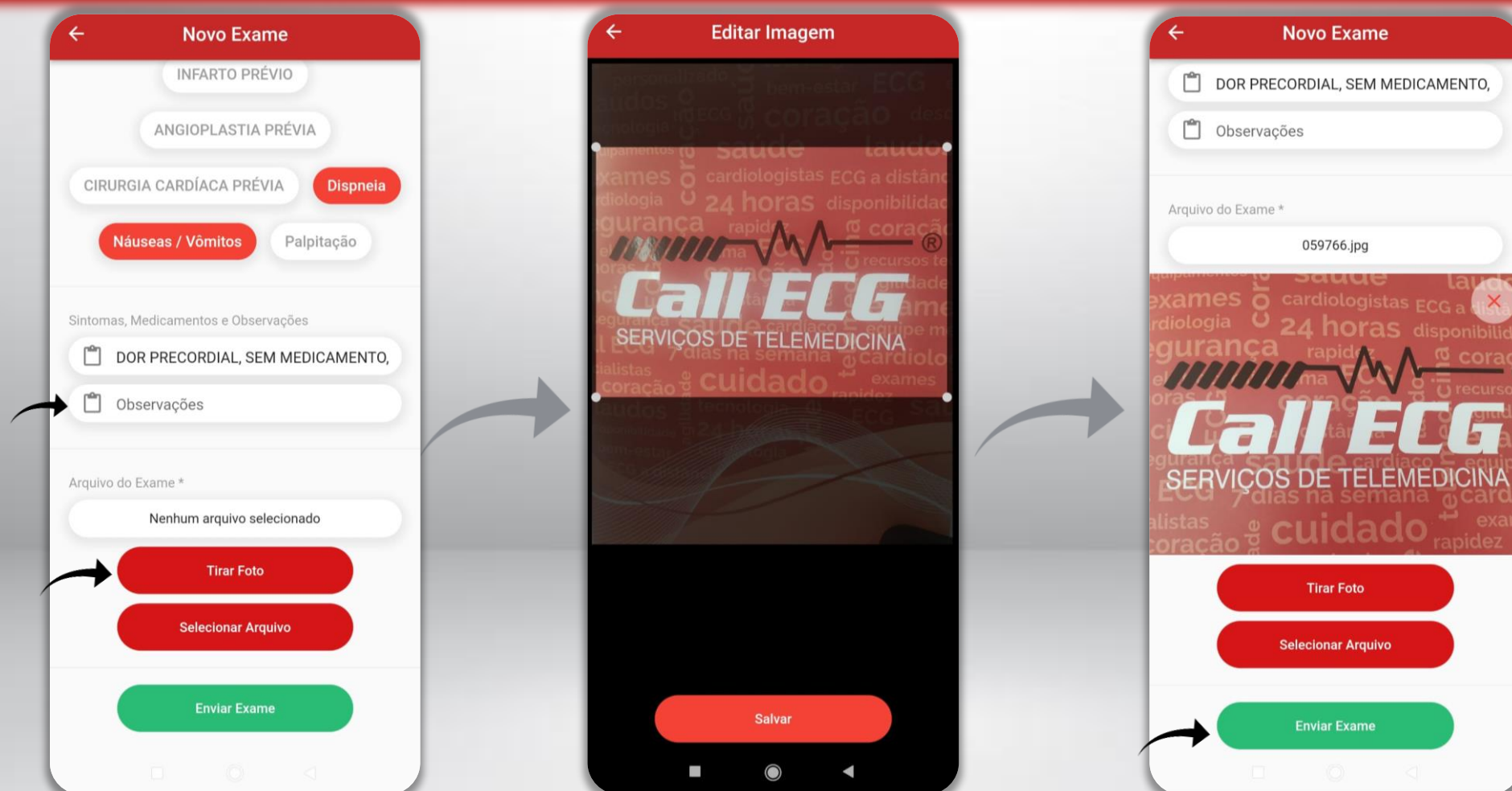

- O exame será encaminhado a central para processamento e aparecerá na aba **AGUARDANDO**.

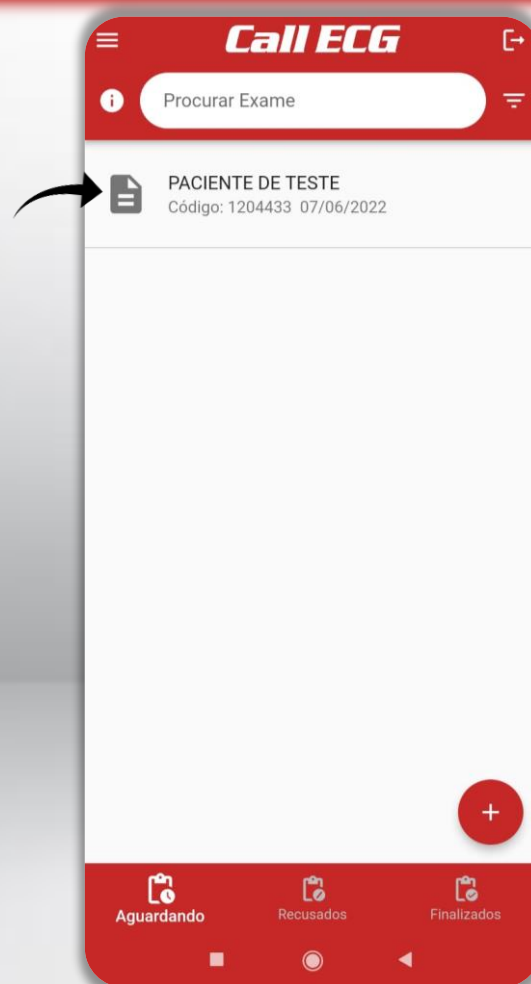



CENTRAL 24 Horas

Fone: (42) 4009-9999/  (42) 9 8838-0746

www.callecg.com.br

E-mail

callecg@callecg.com.br
qualidade@callecg.com.br
suporte@callecg.com.br

R. Nestor Guimarães, 111 (Esq. Cel. Dulcídio)
8º andar | Sala 84 (Edifício Corporate Center) Estrela,
Ponta Grossa - PR, 84040-130