

Colocação dos Eletrodos

Derivações Precordiais

V1: Quarto espaço intercostal na borda direita do esterno


V2: Quarto espaço intercostal na borda esquerda do esterno

V3: Espaço intermediário entre V2 e V4


V4: Quinto espaço intercostal na linha média clavicular

V5: Quinto espaço intercostal na linha axilar anterior

V6: Quinto espaço intercostal na linha axilar média

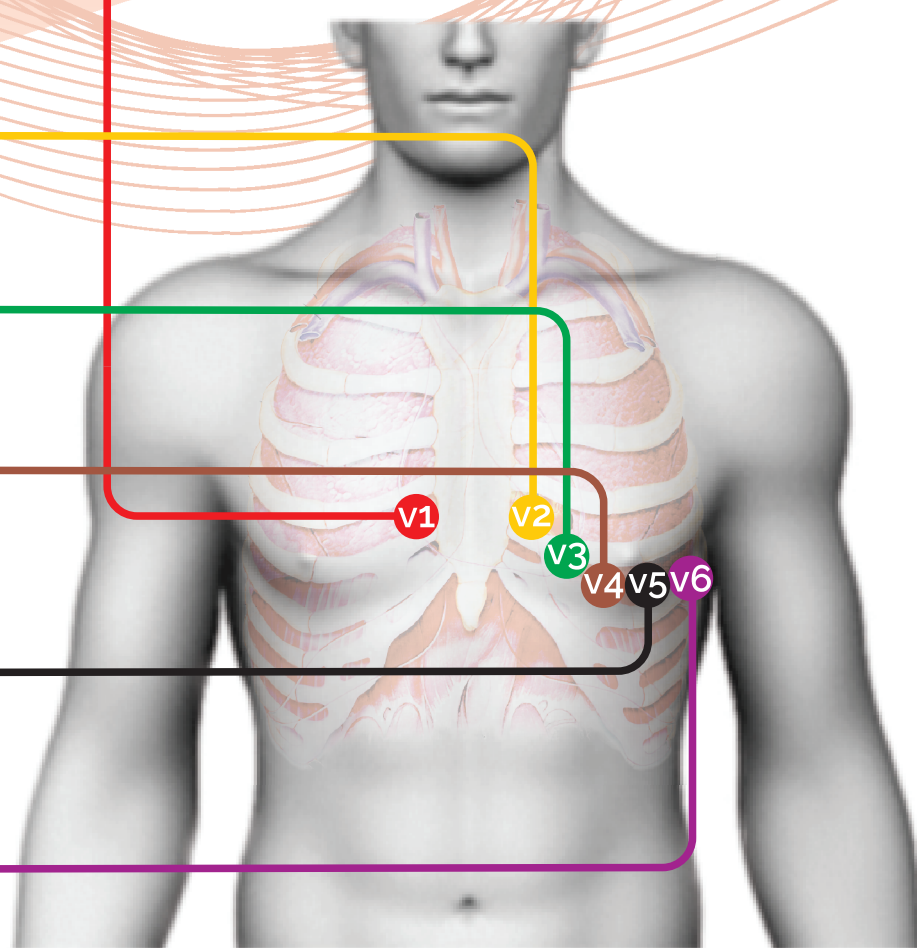

Derivações Periféricas

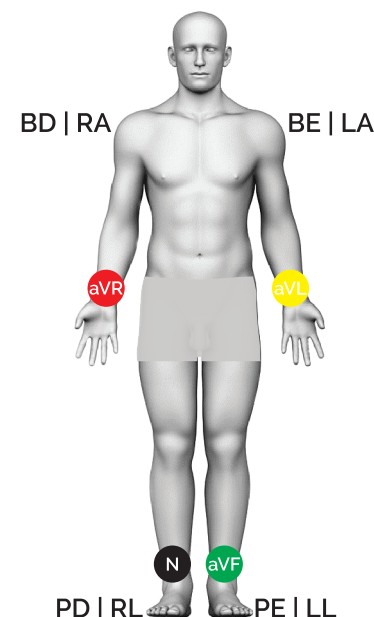


Vermelho: Braço Direito | Right Arm

Amarelo: Braço Esquerdo | Left Arm

Preto: Perna Direita | Right Leg

Verde: Perna Esquerda | Left Leg

Ausência de Membros


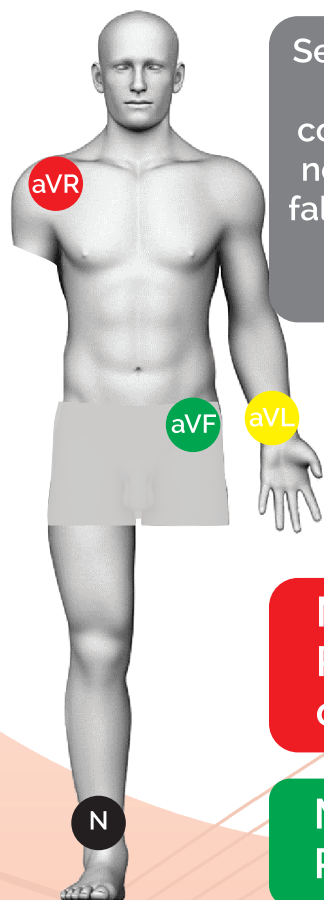


Se o paciente tiver um membro amputado, o eletrodo correspondente será colocado no coto do membro, ou na sua falta, na região mais próxima do tronco (ombros ou região abdominal inferior).

Membros superiores:
Região deltóide, axilar ou supraclavicular

Membros inferiores:
Região inguinal

Dextrocardia

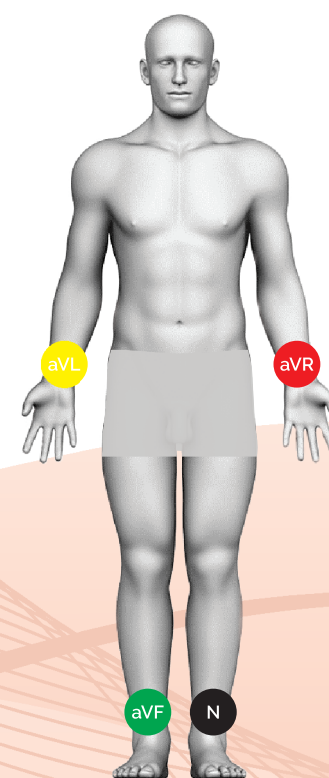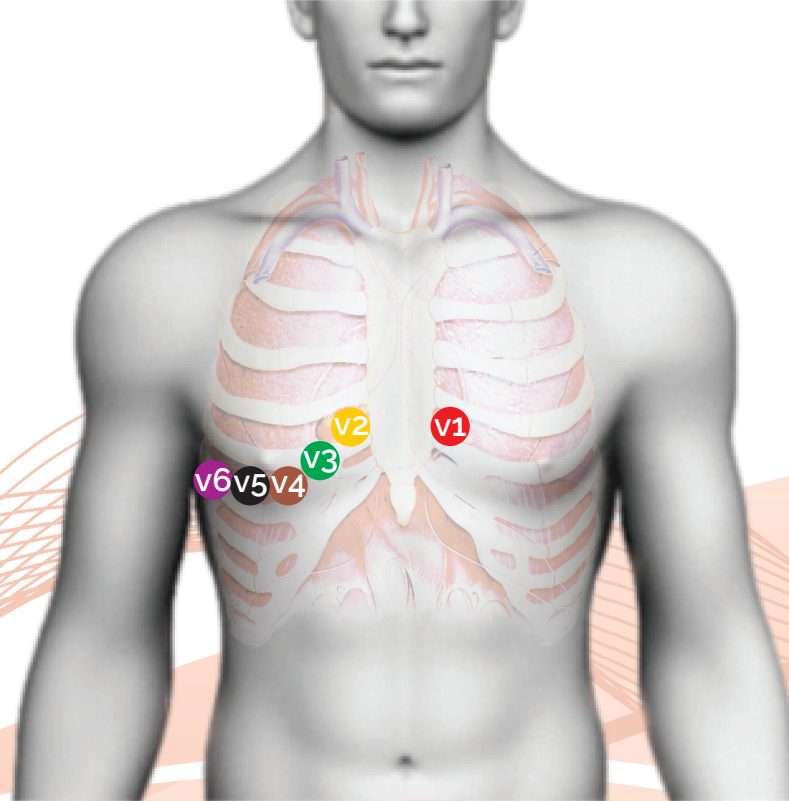

Em caso de dextrocardia confirmada, deve-se inverter todos os cabos.

ATENÇÃO! A correta observação destes pontos é essencial para a precisão do exame! Não economize no gel na colocação dos eletrodos, apenas na derivação, não as conectando com o gel entre si. Certifique-se que esteja bem fixado. Realize a tricotomia no tórax nos locais corretos se preciso, não alterando a posição correta do posicionamento devido aos pelos. Nos membros evite os ossos, posicionando o contato metálico onde tiver mais músculo.