


# POSICIONAMENTO V7-V8-V9



- V7 - Eletrodo ao mesmo nível de V6, na linha axilar posterior.
- V8 - Eletrodo ao mesmo nível de V7, na linha hemiclavicular posterior, abaixo da escápula.
- V9 - Eletrodo ao mesmo nível de V7, à esquerda do corpo vertebral.
- V4 torna-se V7; V5 torna-se V8 e V6 torna-se V9 – Ou seja, V4, V5 e V6 são REPOSICIONADOS.
- A realização do exame deverá ser feita com o paciente deitado lateralmente, sobre seu braço direito. (Exceto pacientes com dextrocardia)

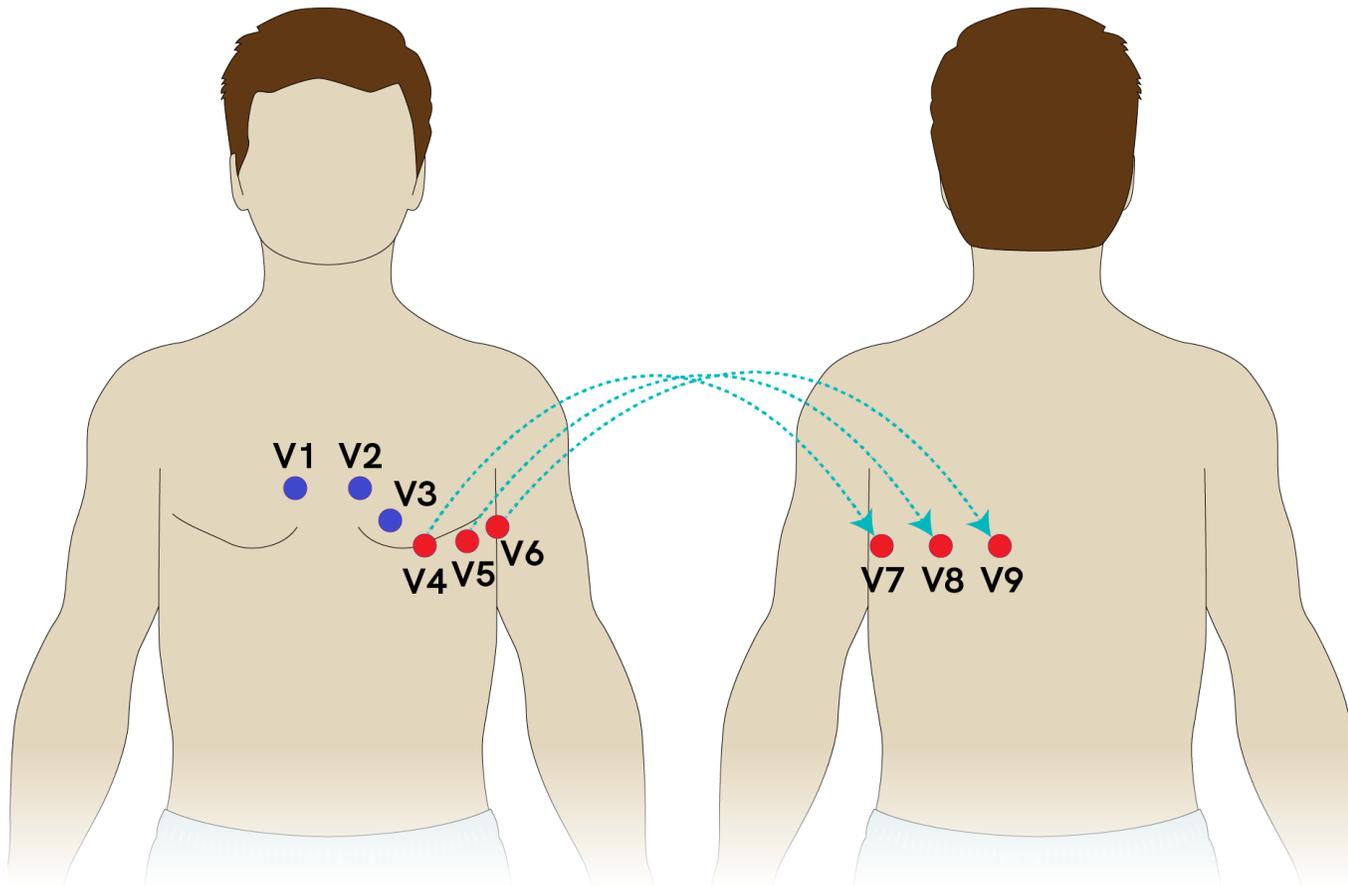

- ✓ **NÃO** mude a posição de nenhum outro eletrodo.
- ✓ **NÃO** inverta os cabos dos membros.
- ✓ **NÃO** inverta o posicionamento no tórax.

No momento do envio do exame pelo sistema, é **IMPRESINDÍVEL** que se **INFORME** nas observações que o ECG foi realizado com **V7, V8 e V9.**



**CENTRAL 24 Horas**

Fone: (42) 4009-9999/ Suporte  (42) 9 8838-0746

[www.callecg.com.br](http://www.callecg.com.br)

E-mail

[callecg@callecg.com.br](mailto:callecg@callecg.com.br)  
[qualidade@callecg.com.br](mailto:qualidade@callecg.com.br)  
[suporte@callecg.com.br](mailto:suporte@callecg.com.br)

R. Nestor Guimarães, 111 (Esq. Cel. Dulcídio)  
8º andar | Sala 84 (Edifício Corporate Center) Estrela,  
Ponta Grossa - PR, 84040-130